

1. Produktname

Komplett ausgestatteter Sensorische Wagen

2. Produktcode

18784900

3. Kurzbeschreibung

Dieses voll ausgestattete, kompakte und mobile Snoezelunit ist ein absolutes Muss! Mobil und platzsparend für Flexibilität im Einsatz. Leicht und leicht zu manövrieren, kann der Trolley scharfe Kurven machen und passt in kleine Aufzüge. Raffinierte Fächer bieten viel Stauraum für Produkte und Dokumente, während die Oberseite zusätzlichen Arbeitsraum bietet. Dank der integrierten Netzversorgung mit Lautsprecherkabeln ist eine Steckdose ausreichend. mit Griffen und gebremsten Rollen für einfache Bedienung.

Elemente auf dem Foto können variieren und abweichen.

Größe : 70 cm lang x 50 cm breit x 110 cm hoch.



4. Farbe

wie abgebildet

5. Sine-Stimulation

Hören, sehen, fühlen und riechen



1. Produktname

Aroma Diffusor

2. Produktcode

15410170

3. Kurzbeschreibung

Verteilt ätherisches Öl auf effektive, natürliche und leise Weise. Der Haartrockner ist nicht beheizt, so dass dieser Duftdiffusor absolut sicher zu bedienen ist und sogar nachts eingeschaltet bleiben kann. Mit Zwei-Positionen-Schalter und einer wiederverwendbaren Ölpatrone. Arbeitet mit 220 Volt, verbraucht sehr wenig Strom!



4. Inhalt

1 x Aromadiffusor

1 x Ölpatrone (**Bitte beachten Sie, dass** das Öl nicht im Lieferumfang enthalten ist).

5. Sinne-Stimulation


Geruch

6. Technische Informationen

Größe : 16 cm hoch x 11,5 cm Durchmesser.

7. Installation

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Diffusor nicht in der Steckdose befindet, bevor Sie das Duftmuster einsetzen.
2. Entfernen Sie die Patrone aus dem Plastikbeutel. Tropfen Sie +/- einen Tropfen ätherisches Öl auf jedes Segment des Duftmusters (bestimmen Sie nach Ihrem eigenen Geschmack). Greifen Sie das Muster durch die Mittelmaserung unten, platzieren Sie es an der Unterseite der Basis und drehen Sie es, bis es in Position klickt.
3. Kennzeichnen Sie den Diffusor auf einer Oberfläche, die den Luftstrom an der Unterseite des Diffusors nicht blockiert. Schließen Sie das Gerät an und stellen Sie den Schalter auf "I" oder "II".

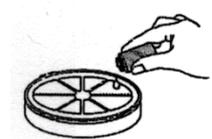

8. Gebrauch

Bei den meisten ätherischen Ölen reicht ein Tropfen auf jedes Segment des Duftmusters aus. Um das Öl zu wechseln, lassen Sie den Aroma-Diffusor eingeschaltet, bis sich kein Geruch mehr ausbreitet. Legen Sie dann ein weiteres Öl auf das Duftmuster. Für jedes andere Öl kann auch ein anderes Duftmuster verwendet werden. Um Öl zu sparen, wenn das Gerät nicht verwendet wird, legen Sie das Duftmuster in einen luftdichten (Plastik-) Beutel. Öle können nach eigenem Ermessen gemischt werden, indem Sie mehrere Öle auf ein Duftmuster geben oder die Öle vor dem Auftragen mischen.

9. Fehlerbehebung

Wenn Kabel beschädigt sind, muss der Aroma-Diffusor vom Lieferanten oder von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, dies selbst zu beheben.





1. Produktname

CD Eternal Forest !

2. Produktcode

23656100

3. Farbe


wie abgebildet

4. Kurzbeschreibung

Ein Paradies der Ruhe mit faszinierenden Klängen von Vögeln und Natur.

5. Sinne-stimulation

das Hören

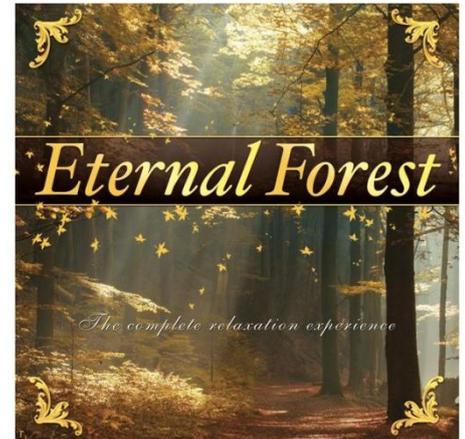

1. Produktname

CD Piano by the Sea

2. Produktcode

23662100

3. Farbe


wie abgebildet

4. Kurzbeschreibung

Eine CD mit schönen, Solo-Klaviermelodien. Genießen Sie die ruhigen Geräusche des Ozeans.

5. Sinne-Stimulation

das Hören

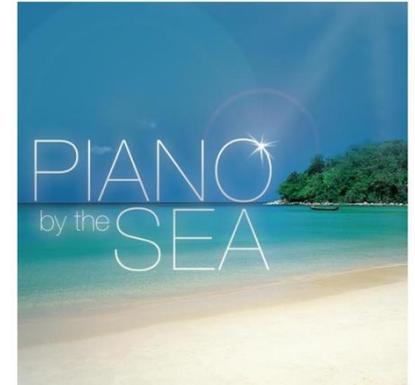

1. Produktname

CD Tranquility

2. Produktcode


23634100

3. Farbe

wie abgebildet

4. Kurzbeschreibung

Sehr wohltuend und beruhigend entführt Sie diese CD über sonnige Sommerwiesen in einen schattigen Rückzugsort, in dem die Zeit langsam vergeht und die Außenwelt keine Rolle bei der Störung der Ruhe spielt.

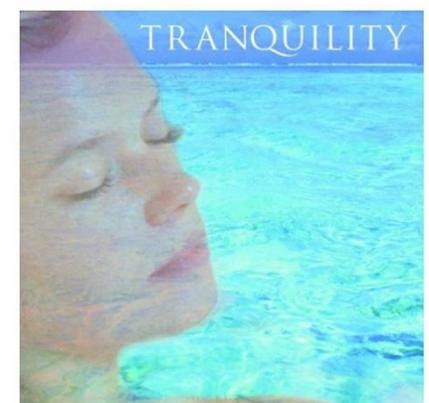

5. Sinne-Stimulation

das Hören

1. Produktname

Chlortablette

2. Produktcode

814317961



3. Kurzbeschreibung

Im Zusammenhang mit dem Vorkommen von Bakterien im Leitungswasser und um das Wasser frisch und rein zu halten, empfehlen wir die Verwendung von demineralisiertem Wasser oder Wasser mit Chlortabletten.

Füllen Sie die Wassersäule mit Leitungswasser und fügen Sie reine Chlortabletten hinzu;

* 1 Tablette mit 1,8 Gramm pro 10 Liter Wasser (dies kann zunächst unangenehm riechen). Das aktive Chlor lässt nach etwa einem Monat bis zu einem halben Jahr nach.

4. Inbetriebnahme

Im Zusammenhang mit dem Vorkommen von Bakterien (einschließlich Legionellen) im Leitungswasser und um das Wasser frisch und rein zu halten, empfehlen wir für die Wartung Ihrer Wassersäulen Folgendes:

Option 1 : Füllen Sie die Wassersäule mit demineralisiertem Wasser pro Kanister von) 10 liter

Option 2 : Füllen Sie die Wassersäule mit Leitungswasser und fügen Sie reine Chlortabletten hinzu = 1 Tablette pro Wasser (dies kann am Anfang getan werden 1.8 gram10 liter Geruch unangenehm)

Wassersäule von :

Höhe	Durchmesser	Liter	Tabletten
100 bis 150 cm	x 15 cm	± 15-22	2 Tabletten
170 bis 220 cm	x 15 cm	± 25-33	3 Tabletten
120 cm	x 20 cm	± 32	3 Tabletten
150 cm	x 20 cm	± 39	4 Tabletten
170 bis 200 cm	x 20 cm	± 45-52	5 Tabletten
220 cm	x 20 cm	± 59	6 Tabletten

Verwenden Sie beim Nachfüllen nur demineralisiertes Wasser oder lassen Sie Wasser mit Chlor vor dem Hinzufügen 24 Stunden lang einwirken.

Das Wasser muss komplett gewechselt werden, wenn es sich verfärbt (umkippt). Das aktive Chlor lässt nach etwa einem Monat bis zu einem halben Jahr nach. Neue Chlortabletten können über Nenko bestellt werden.



1. Produktname


Magnetisch Effektrad – Machen Sie es Selbst

2. Produktcode

22336130

3. Farbe

wie abgebildet

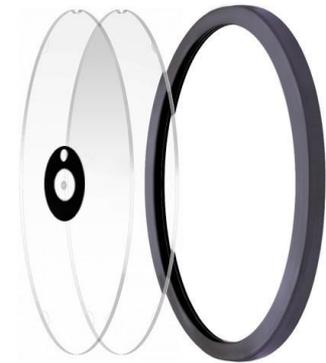

4. Kurze Beschreibung

Ein transparentes Rad, mit dem Sie Ihr eigenes Lieblingseffektrad herstellen können! Entfernen Sie den schwarzen Gummiring und zeichnen Sie eine Zeichnung auf den Kunststoff mit speziellen Markern oder verwenden Sie die Negative Ihrer Lieblingsfotos für einen persönlichen Effekt. Dieses Magneteffektrad kann mit dem Magnetradmotor 22614 verwendet werden. Wenn Sie bereits einen Projektor mit Radmotor haben, müssen Sie Artikel 22394 (Adapter für Magnetrad) erwerben, um das Effektrad auf dem Radmotor platzieren zu können.

Größe: 15 cm Durchmesser

5. Sinne-Stimulation

sehen

1. Produktname

Igelball 10 cm blau

2. Produktcode

13721200

3. Farbe

wie abgebildet

4. Kurze Beschreibung

Hergestellt aus weichem Kunststoff in drei Größen. Rollen Sie über Ihre Arme für eine leichte Massage.

5. Sinne-Stimulation


Sehen & Fühlen

1. Produktname

Igelball 8 cm gelb

2. Produktcode

137190200

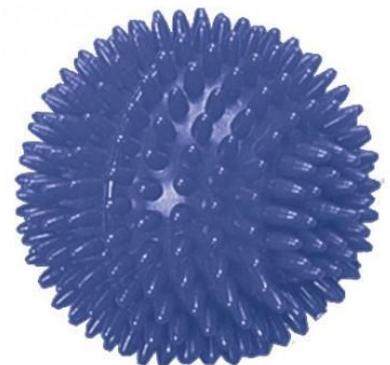

3. Farbe

wie abgebildet

4. Kurze Beschreibung

Hergestellt aus weichem Kunststoff in drei Größen. Rollen Sie über Ihre Arme für eine leichte Massage.

5. Sinne-Stimulation

Sehen & Fühlen

1. Produktname

Igelkugel weich 7 cm dunkelgrün

2. Produktcode

15397200

3. Farbe

wie abgebildet

4. Kurze Beschreibung

Pastellfarbene Kugeln, die sanft massieren. Verwenden Sie sie zur Handentspannung und als Hilfsmittel für Greifübungen. Kann im Wasser verwendet werden. Latexfrei.

5. Sinne-Stimulation

Sehen & Fühlen

1. Produktname

Igelkugel weich 8 cm orange

2. Produktcode

15394200

3. Farbe

wie abgebildet

4. Kurzbeschreibung

Igelball sanft massierend. Verwenden Sie die Bälle zur Entspannung der Hände oder als Hilfsmittel bei Greifübungen. Kann im Wasser verwendet werden. Pro Stück.
Größe: 8 cm

5. Sinne, die Stimulationen

fühlen





1. Produktname

Geruchskiste

2. Produktcode

52084170

3. Farbe

Wie abgebildet.



4. Kurzbeschreibung

Eine Sammlung von 12 verschiedenen Düften, welche viele Erinnerungen weckt. Wunderbare Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen. Besteht aus den Düften: Nelke, Zitrone, Zahnarzt, Apfel, Birne, geschnittenes Gras, Maiglöckchen, Leder, Marzipan, Hyazinthe, Desinfektionsmittel und Lavendel. Inklusive Aufbewahrungsbox. Die Flaschen haben einen Tropfverschluss.

5. Inhalt

1 x Box

12 x Düfte

6. Sinne-Stimulation

Geruch

7. Sicherheit



BITTE BEACHTEN SIE!!!

Halten Sie sich von Augen, Ohren, Nase und Ohren fern!
Nicht schlucken!
Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe!



8. Technische Informationen

Größe: Box 14,5 x 12 x 7,5 cm, Flaschen 6,5 cm hoch.



1. Produktname

Glitzerkugeln

2. Produktcode

15227200

3. Farbe

wie abgebildet



4. Kurzbeschreibung

Schön zu sehen, zu hören, zu berühren, zu werfen, zu hüpfen und zu rollen. Diese funkelnden, hohlen Kugeln haben eine klar klingende Glocke. Hergestellt aus verbundenen kleinen Kugeln, die ein leicht griffiges Äußeres bieten. Die Kugeln tragen einen leichten Geruch mit sich.

Größe : 6 cm Durchmesser, 6er Set. Verschiedene Farben.

5. Sinne-Stimulation

Hören, Sehen, Fühlen und Riechen

1. Produktname

Kleine Wassersäule 80x10 cm

2. Produktcode

19126095

3. Farbe

Wie abgebildet

4. Kurzbeschreibung

Eine optisch ansprechende Bubble-Einheit für den passiven Einsatz. Nur zur Dekoration ändert diese robuste, nicht interaktive Wassersäule allmählich ihre Farbe. Perfekt für diejenigen, die eine einfache Wassersäule wollen, ohne viel Aufhebens. Ideal für Wartebereiche und Wohnzimmer. Preislich attraktiv. Kann nicht mit den Schalttafeln kombiniert werden. Etwa 7 Liter Wasser fließen in diese Wassersäule.

5. Sinne-Stimulation

Anblick

6. Inbetriebnahme

- Bevor die Wassersäule verwendet werden kann, muss sich die Wassersäule auf einer stabilen, nicht abfallenden Oberfläche befinden.
- Überprüfen Sie vor dem Befüllen, ob der Luftschlauch in der Basis der Wassersäule fest befestigt ist, Sie können ihn erreichen, indem Sie die Kunststoffkappe mit einem Schraubendreher lösen und über das Rohr heben, nach der Überprüfung können Sie die Haube wieder zusammenbauen.
- Stecken Sie nun den Netzstecker in die richtige Verbindung auf der Grundplatte.





- Testen Sie durch das Befüllen von ca. 0,5 Litern Wasser, ob der Anschluss und das Rohr wasserdicht sind.
- Kein Wasser sollte irgendwo ausgehen, wenn dies immer noch der Fall ist, überprüfen Sie die vorherigen Schritte. Bei Bedarf nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

8. Technische Informationen

Größe: 80 cm hoch x 10 cm Durchmesser

9. Installation

- Um die Wassersäule zu füllen, verwenden Sie demineralisiertes Wasser oder Wasser mit Chlortabletten und schalten Sie die Wassersäule beim Befüllen ein.
- Schließen Sie vor dem Einschalten den Steckertransformator an die Wassersäule an.
- Stecken Sie den Transformator in die Steckdose auf der Rückseite der Wassersäule
- Füllen Sie das Rohr auf maximal 40 mm von der Oberkante aus.
- Bitte beachten Sie! Beim Befüllen darf unter der Wassersäule kein Wasser austreten.
- Das Plexiglasröhrchen sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden (kein Waschmittel verwenden!)
- Aufgrund der Verdunstung des Wassers ist es normal, das Rohr regelmäßig nachzufüllen.
- Mit der Zeit kann das Wasser trüb werden, dann das gesamte Rohr entleeren, gründlich reinigen und wieder nachfüllen.

Kontrolle der Luftmenge

Auf der Rückseite der Wassersäule befindet sich ein Drehknopf, mit dem Sie die Luftmenge der Wassersäule steuern können. Um die Luftblasen zu reduzieren, drehen Sie das Zifferblatt im Uhrzeigersinn. Um die Luftblasen anzuheben, drehen Sie sich gegen den Uhrzeigersinn. Auf diese Weise können Sie auch das Geräusch der Luftblasen beeinflussen.

Fehlerbehebung bei potenziellen Problemen

Trotz sorgfältiger Montage und Kontrolle kann es vorkommen, dass die Wassersäule nicht wasserdicht ist. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Wassersäule auf Beschädigungen. Die Wassersäule darf nur unter Aufsicht verwendet werden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob kein Wasser aus der Wassersäule oder hinter dem Rückschlagventil läuft.

Der Hersteller haftet nicht für Wasserschäden, die durch die Wassersäule verursacht werden.

Im Falle einer Reklamation übergeben Sie bitte die Originalrechnung und die Seriennummer.

1. Produktname

Kooshbal 10 cm

2. Produktcode

13435200

3. Farbe

wie abgebildet

4. Kurzbeschreibung

Ultra taktile Pom Pom Ball. Weich und leicht zu fangen. Diese





ultimative Friemel- und Frutselkugel hat gummielastische Saiten, die sich schön und weich anfühlen. Der Kooshball kann helfen, die Feinmotorik und Koordination zu verbessern, aber er kann auch die Konzentrationsfähigkeit verbessern. Der Ball eignet sich sicherlich auch, wenn visuelle Reize benötigt werden.

Größe: 10 cm

5. Sinne-Stimulation

Sehen & Fühlen

1. Produktname

Leuchtende Kuppel

2. Produktcode

29951111

3. Farbe

Wie abgebildet.

4. Kurzbeschreibung

Dieser leuchtende Kieselstein ändert seine Farbe, sobald die Fernbedienung gedrückt wird. Es gibt auch einen Modus, in dem sich die Farben automatisch ändern können. Die Hemisphäre des Lichts stimuliert die Sinne mit Farbe, indem sie eine unendliche Farbpalette erzeugt - von warmen Pastelltönen bis hin zu lebendigen dynamischen Farben. Auch für eine Rollstuhl-Arbeitsplatte geeignet.

Grösse: 34 x 34 x 12 cm



5. Inhalt

- 1) Stimmungslampe
- 2) Fernbedienung
- 3) Netadapter

6. Sinne-Stimulation

Siehe

7. Inbetriebnahme

Sie müssen Ihre Lampe vor dem Gebrauch aufladen. Die Ladestation befindet sich an der Unterseite der Lampe. Ein kleines rotes Licht leuchtet auf (sichtbar im Dunkeln), wenn das Element aufgeladen wird, und es wird grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Das Aufladen dauert ca. 3 Stunden.

Um Ihre Lampe zu verwenden, drücken Sie den Netzschalter an der Unterseite der Lampe. Sobald die Lampe aufleuchtet, können Sie sie nun mit der Fernbedienung steuern. Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Helligkeit anzupassen und die Reihenfolge für den Farbwechsel zu ändern. Um die Fernbedienung zu verwenden, entfernen Sie die Kunststoffolie, die aus dem Batteriefach herausragt. Die Lampe kann auch mit der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden. (Wenn Sie mehr als ein Möbelstück verwenden, können sie gleichzeitig mit derselben Fernbedienung arbeiten: Sie können in der gleichen Farbe gehalten werden, oder sie können getrennt werden, wenn sie



eingeschaltet sind, um die Farben zu variieren).

8. Sicherheit

Jede Änderung des Produkts führt zum Erlöschen der Garantie und kann dieses Produkt unsicher machen.2) Zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.3) Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Adapter auf.4) Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem Adapter kompatibel ist, indem Sie das Etikett des Adapters überprüfen.5) Laden Sie das Produkt nicht lange auf, da dies die Batterie beschädigen kann.6) Wenn Sie der Meinung sind, dass die Röhre überhitzt oder raucht, Ziehen Sie dann das Netzkabel ab und wenden Sie sich sofort an den Hersteller.7) Die Lampe ist nicht wasserdicht, verwenden Sie sie nicht in der Nähe von Wasser.8) Wischen Sie die Kamera mit einem feuchten Tuch ab.9) Halten Sie die Lampe nicht lange in der Sonne.10) Dieser Artikel ist kein Spielzeug und die Aufsicht durch Erwachsene ist immer notwendig.11) Entleeren Sie den Akku, bevor Sie ihn aufladen.

9. Technische Informationen

Technisch• Material: PE• Batterie: eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie• Akkulaufzeit: bis zu 8 Stunden, abhängig von Modus und Farbeinstellung.

1. Produktname

Magnetisches Effektrad - Tropischer Fisch

2. Produktcode

22367130


3. Farbe

wie abgebildet

4. Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung Effekträder verändern die Atmosphäre im Raum und können mit dem Nenko, LED, 100 LED und Aura Projektor verwendet werden. Wenn Sie bereits eine Projektor-LED / 100 LED oder Aura mit einem nichtmagnetischen Radmotor haben, müssen Sie Artikel 22394 (Adapter für Magnetrad) extra kaufen, um das Magnetrad auf dem Radmotor platzieren zu können.

Größe: 15 cm Durchmesser

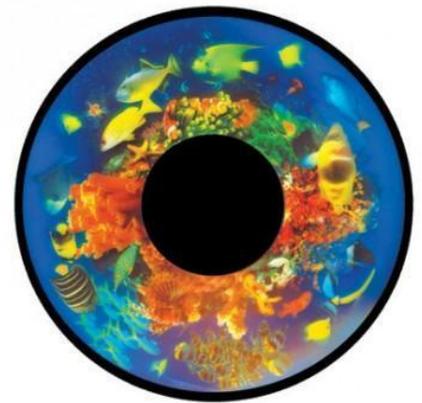

5. Sinne-Stimulation

Sehen

1. Produktname

Magnetisches Effektrad - Vier Jahreszeiten

2. Produktcode

22358130



3. Farbe

wie abgebildet

4. Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung Effekträder verändern die Atmosphäre im Raum und können mit dem Nenko, LED, 100 LED und Aura Projektor verwendet werden. Wenn Sie bereits eine Projektor-LED / 100 LED oder Aura mit einem nichtmagnetischen Radmotor haben, müssen Sie Artikel 22394 (Adapter für Magnetrad) extra kaufen, um das Magnetrad auf dem Radmotor platzieren zu können.

Größe: 15 cm Durchmesser

5. Sinne- Stimulation

Sehen

1. Produktname

Massagerolle

2. Produktcode

14011840



3. Farbe

Wie abgebildet.

4. Kurzbeschreibung

Der Massageroller ist ein flexibles Gerät, das eine Massage aufgrund der Vibrationen, die sie erzeugt, viel angenehmer macht. Die 123 cm lange Rolle ist aus leichtem Material gefertigt und tragbar. Es reduziert den Druck auf Muskelkater. Ein spezieller Verschluss für die handlose Massage ist im Lieferumfang enthalten. Einstellbar in zwei Geschwindigkeiten. Ausgestattet mit einer gerippten Struktur. Funktioniert mit 2 C Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Farbe je nach Lagerbestand.


Größe: 123 cm

5. Sinne-Stimulation

Fühlen

6. Installation

1. Legen Sie die Batterien in beide Seiten, indem Sie den Kopf ausschalten
2. Schließen Sie die Köpfe wieder
3. Mittels eines Pfeils am Ende können Sie es langsam auf drei Positionen absetzen und zwar schnell.

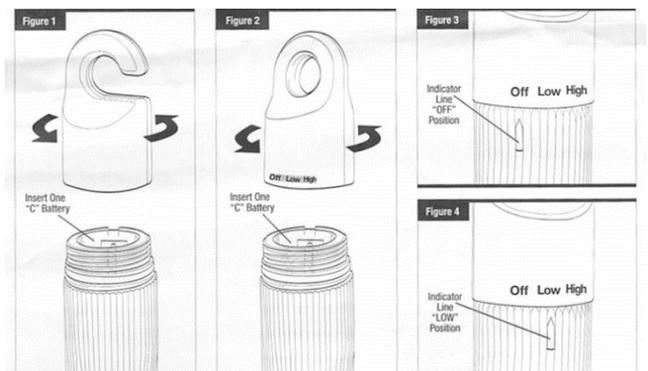

7. Sicherheit

Warnung:

- Batterien sollte immer durch einen Erwachsenen ersetzt werden
- Verwenden Sie Alkalibatterien für beste Ergebnisse
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien
- Entfernen Sie immer die alten und leeren Batterien

1. Produktname

Interaktive Lichtquelle Nenko

2. Produktcode

18517112

3. Farbe

Weiß



4. Kurzbeschreibung

Lichtquelle für Glasfasernebelstränge WiFi-kompatibel mit der gesamten "Nenko Interactive" Serie. Ausgestattet mit ON / OFF und PAUSE-Drucktaste für eine feste Farbe, Schalter und USB-Anschluss für Servicezwecke. Mit wartungsfreier LED-Beleuchtung. Funktioniert auf dem NENKO Interactive Switch Panel (separat zu bestellen). Anschluss 3 cm Durchmesser.

5. Inhalt

1 x Interaktive Lichtquelle Nenko

1 x Netzteil mit amerikanischem, europäischem und australischem Farbverlauf

6. Sinne-Stimulation

Sehen

7. Sicherheit

- Geeignet für den Innenbereich in trockenen Räumen.
- Versuchen Sie nicht, die Lichtquelle zu öffnen, sie enthält empfindliche Elektronik.
- Stellen Sie sicher, dass die Lichtquelle an einem Ort mit guter Belüftung und nicht unter Kissen oder ähnlichem montiert ist. Das Gerät wird heiß und muss belüftet werden.
- Befestigen Sie nichts anderes als ein Fasernebelbündel in der runden Aussparung der Lichtquelle.
- Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit dem Produkt geliefert wurde

8. Technische Informationen

Netzadapter:

- Eingangsspannung (voedingsadapter) 100-240Vac 50/60HZ
- Eingang Stromstärke 0,6A
- Ausgangsspannung (Netzadapter) 12V 1.25A (15Watt)



- Zulassung: CE, UL, CUL

Lichtquelle:

- Eingangsspannung 12V
- LED-Ausgangsleistung 9W
- Prüfung: CE – ROHS

9. Installation

Schritt 1:

Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig von der Lichtquelle.


Schritt 2:

1. Befestigen Sie den runden Metallenteil des Fasernebels in der runden Aussparung der Lichtquelle. Bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass die Schraube oben gedreht ist, damit der Fasernebel gut in die Aussparung passt.
2. Achten Sie darauf, dass sich der Fasernebel so weit wie möglich in der runden Aussparung befindet. Möglicherweise müssen Sie den Fasernebel hin und her bewegen, um sicherzustellen, dass er sowohl in den inneren als auch in den äußeren Ring geschoben wird.
3. Ziehen Sie die obere Schraube fest, um den Fasernebel in der Lichtquelle zu verriegeln.



Schritt 3:

Packen Sie das Netzteil aus und wählen Sie die richtige Verbindung für das Land Ihrer Wahl. Schließen Sie dies an, indem Sie zuerst eine Seite der Steckverbindung Ihrer Wahl anbringen und sie dann zum Endpunkt schieben und an Ort und Stelle klicken.

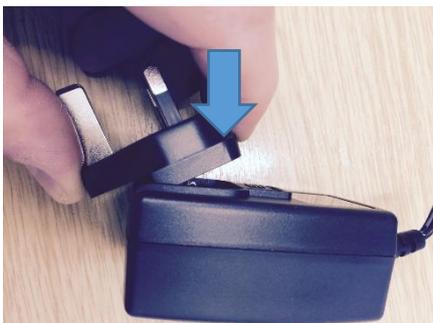

Schritt 4:

Schließen Sie den Stecker am Ende des Netzteils an den Stromanschluss der Lichtquelle an.

Schritt 5:


Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

Schritt 6:

Schalten Sie die Lichtquelle mit dem Ein-/Aus-Taster ein.



10. Inbetriebnahme

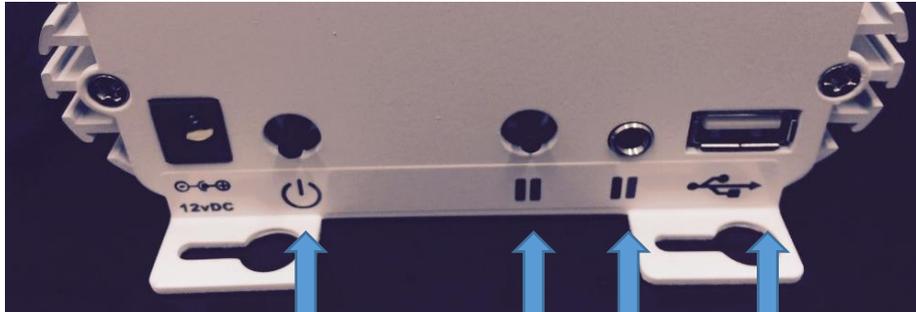

Ein /

Aus-Pause / Schalter - USB (nicht verwendet)

Eingabe koppeln

- Ein/Aus:** Verwenden Sie diese Taste, um die Lichtquelle ein- und auszuschalten.
- Pause:** Drücken Sie kurz diese Taste, um die Farbänderung zu stoppen. Drücken Sie erneut, um die Farbänderung fortzusetzen.
- Koppeln:** Halten Sie die Taste 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtquelle ROSA wird. Das Gerät ist nun auf "TORQUE MODE" eingestellt. In diesem Modus blinkt es langsam PINK, bis es ein Kopplungssignal vom Nenko Interactive Farbschalter (22009135) empfängt. Drücken Sie erneut für 7 Sekunden, um den "PAIRING MODE" abzubrechen.
- Eingangsschalter:** Gleiche Funktion wie die PAUSE / COUPLE-Taste, die nur von einem Play Switch mit 3,5-mm-Klinkenanschluss (nicht im Lieferumfang enthalten). Fragen Sie nach den Möglichkeiten.
- USB** : Derzeit wird dieser Eingang nicht verwendet/nicht vorprogrammiert.



11. Verwandte Produkte

In Kombination mit der Verwendung des Nenko Interactive Color Switch Panel (22009135) ändert sich die Farbe der Lichtquelle beim Drücken einer der 6 Drucktasten auf dem Schalterpanel. Mit diesem Schalterfeld können Sie mehrere Elemente steuern.

1. Produktname

Nenko Projektor

2. Produktcode

23157 130

3. Farbe

Weiß

4. Kurzbeschreibung

Dieser Nenko-Projektor ist ein exklusiv für Nenko entwickeltes Produkt. Der Projektor verfügt über einen eingebauten Radmotor, an dem sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Räder montiert werden können. Ein Adapterkit ist im Lieferumfang enthalten, so dass die verschiedenen Effekträder / Flüssigräder auf diesem Projektor verwendet werden können. Der eingebaute Radmotor hat 4 verschiedene Geschwindigkeiten 2 U / min, 1,5 U / min, 1 U / min, 0,5 U / min. Ein Tisch-/Deckenständer ist im Lieferumfang enthalten. Auf der Rückseite des Projektors befindet sich ein Ein-/Ausschalter. Funktioniert auf 12V. Der Projektor wird ohne Flüssigkeits-/Effektrad geliefert. Inklusive Adapter-Kit. Das Objektiv ist 85 mm groß. Grösse: 31 x 23 x 22 cm

5. Sinne-Stimulation

Sehen

6. Technische Informationen

Elektrische Spezifikation: EINGANG: 100-240V 50 / 60Hz 0.8A AUSGANG: 12V 2A CE UL

7. Installation


Schließen Sie das Netzteil an den 12VDC-Anschluss auf der Rückseite des LED-Projektors an und schließen Sie es an die Steckdose an:





Räder hinzufügen:

Die Effekträder können einfach im Radschlitz des Projektors hinzugefügt werden. Unsere Räder sind magnetisch befestigt, was die Installation schnell und einfach macht:

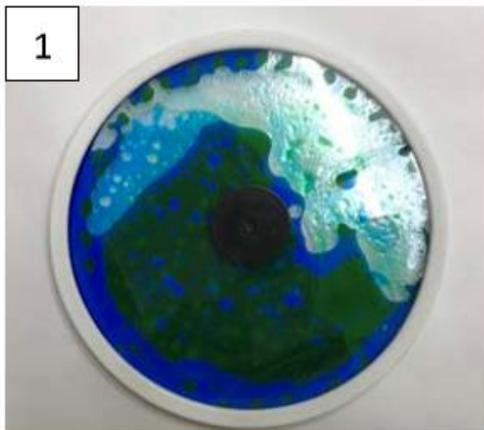



Adaptersatz zur Installation magnetischer oder nichtmagnetischer Effekte der Optikinetics-Effekte:



Nichtmagnetisches Rad installieren

Um ein nichtmagnetisches Rad zu installieren, schrauben Sie einfach den schwarzen Adapter auf das Rad. Schneiden Sie dann das Rad mit der Seite des Adapters am Magnethalter im Projektor ab.

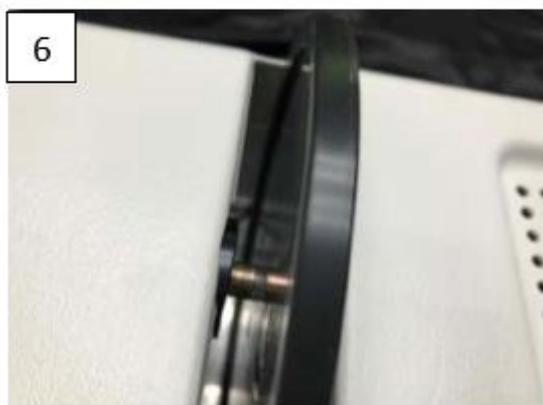

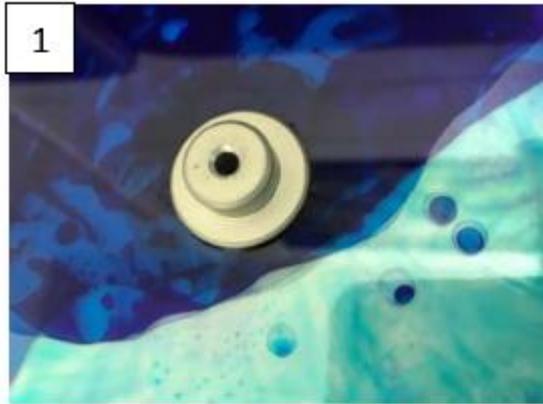



So installieren **Sie das Optikinetic-Magneteffektrad** Verwenden Sie den mitgelieferten Silberadapter, um ein **Magneteffektrad**

mit dieser Art von Anschluss zu installieren. Schieben Sie es einfach auf das Ende des Rades und befestigen Sie es am magnetischen Medium im Projektor:



8. Zusätzliche Informationen

Schalten Sie nach der Installation des Effektrads den LED-Projektor mit dem Netzschalter ein. Der Nenko-Projektor hat vier Geschwindigkeiten: 0,5 – 1,0 – 1,5 und 2,0 Umdrehungen pro Minute. Wählen Sie mit der entsprechenden Taste die gewünschte Geschwindigkeit aus. Eine grüne Kontrollleuchte leuchtet auf, um die ausgewählte Geschwindigkeit anzuzeigen:

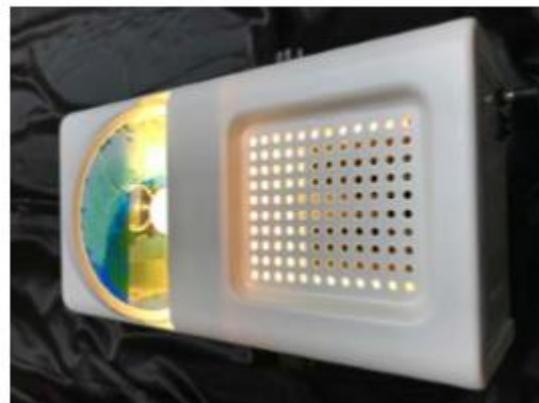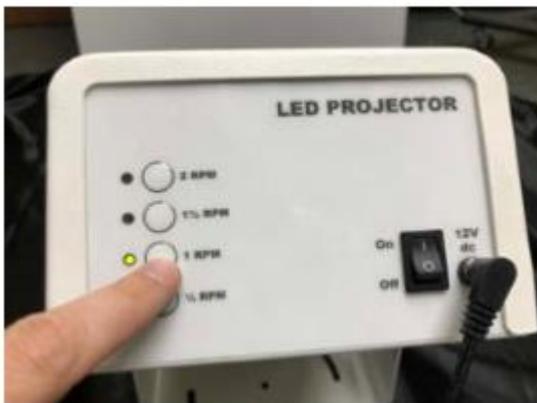

Kippen Sie den Projektor wie gewünscht und ziehen Sie die Muttern auf beiden Seiten fest an. Passen Sie den Fokus wie gewünscht an, um das Bild zu fokussieren, es ist ratsam, den Fokus zu ändern, wenn der Projektor Betriebstemperatur hat (da Hitze die Schärfe des Bildes beeinflussen kann):



9. Wartung

Der LED-Projektor wurde von Nenko so konzipiert, dass er wenig Wartung erfordert. Reinigen Sie die Außenseite nach Belieben mit einem weichen, feuchten Tuch, das leicht in Spülmittellösung getränkt ist. Blasen Sie sichtbaren Staub im Effektradschlitz mit einer "Luftpistole" weg.

LET OP: Reinigen Sie den Nenko-Projektor nicht mit einem nassen Tuch.

1. Produktname

supersichere Faseroptik 100 Stränge x 100 cm

2. Produktcode

17903112

3. Kurzbeschreibung

Maximale Sicherheit in Glasfaserdrähten, diese Fiberglow-Drähte aus Kunststoff sind die sicherste Option. Alle Fasernebelprodukte sollten jedoch nur unter Aufsicht verwendet werden. Funktioniert nur in Kombination mit einer Lichtquelle (nicht im Lieferumfang enthalten). Robust, klar und langlebig.



4. Inhalt

1x Faseroptikstränge

Eine Lichtquelle ist notwendig. Diese muss separat erworben werden (18517). Lesen Sie daher auch die separate Gebrauchsanweisung für die Lichtquelle. Für zusätzliche Sicherheit haben die Enden der Faseroptikstränge geschützte Oberseiten.

5. Sinne-Stimulation

Siehe

Sicherheit

Fasernebelprodukte sind eine ständige Quelle sicherer taktiler und visueller Stimulation. Verwenden Sie sie jedoch immer nur unter professioneller Aufsicht. Auch wenn es sicher ist, die Fäden entlang des Gesichts zu streicheln, legen Sie sie niemals in den Mund.

Diese Fasernebel sind extrem stark und bruchfest, wenn sie gebissen werden, ermutigen die Benutzer jedoch nie, dies zu tun.

Reinigen Sie den Fasernebel regelmäßig mit einem sauberen, feuchten Tuch. Schalten Sie zuerst die Lichtquelle aus.

7. Installation

1. Entfernen Sie die Verpackung und die temporären Verbindungen, die die Fasern miteinander verbunden halten.
2. Verbinden Sie den Fasernebel mit der Lichtquelle – führen Sie dazu den Knopf (Metallzylinder am anderen Ende der Drähte) in den Anschluss (Metallhohlzylinder) der Lichtquelle ein. Siehe auch die Gebrauchsanweisung der Lichtquelle. Der Metallknopf hat einen Durchmesser von 30 mm, was bedeutet, dass dieser Fasernebel für alle Nenko-Lichtquellen geeignet ist



8. Inbetriebnahme

Wenn eine Lichtquelle mit einem Farbrad verwendet wird, zeigt der Fasernebel eine konstante Farbänderung über seine gesamte Länge. Die wechselnden Farben sind visuell anregend und fördern die Fokussierung. Gleichzeitig sind sie beruhigend und entspannend.

Die Fasernebeldrähte sorgen für eine faszinierende taktile Stimulation. Einige Ideen für die Verwendung sind:

1. Befestigen Sie beispielsweise die Lichtquelle an der Wand oder in einer gepolsterten Basis, wobei die Drähte für die Wirkung eines Wasserfalls nach unten zeigen.
2. Breitet die Drähte aus und zeigt, dass sie sicher zu berühren sind.
3. Fächern Sie die Spitzen der Drähte auf, um ein farbiges Licht über die Hände oder das Gesicht zu verteilen.
4. Verteilen Sie die Drähte über eine Matte und lassen Sie eine Person darauf liegen oder sitzen.
5. Wickeln Sie die Drähte um die Gliedmaßen oder den ganzen Körper.
6. Weben Sie die Fäden durch einen Pullover, eine Schürze oder ein Netz, die dann an einer Person drapiert werden können.
7. Nutzen Sie den Fasernebel interaktiv mit einem Schaltsystem.

9. Instandhaltung

Fasernebelprodukte bieten eine hervorragende visuelle und taktile Stimulation. Diese Produkte sollten jedoch immer unter gezielter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Fasernebel sind sicher, wenn sie unter Aufsicht richtig verwendet werden. Nenko kann keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernehmen, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verursacht werden. Diese Fasernebeldrähte sind etwas dicker als die Standardfasernebel.

Die Fasernebeldrähte können durch ein feuchtes Tuch mit eventuell einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Metallknopf nicht feucht wird. Trocknen Sie die Drähte vor Gebrauch gründlich ab. Hängen Sie die Fasernebeldrähte nicht in Wasser auf.

1. Produktname

Spiegelkugelständer

2. Produktcode

18292111

3. Kurzbeschreibung

Eigenschaften Drehbare Spiegelkugel Standard 13 cm Spiegelkugel (Glasfacetten 8 x 8 mm) LEDs (6x rot, 3 Die Spiegelkugel dreht sich um ihre eigene ist bei 8 U / min und wird von der 18 x blauen, 3 x grünen, 6 x weiß) in der Basis unten beleuchtet. Das leichte und kompakte Objekt ermöglicht den Anschluss verschiedener Einsatzorte über Netzkabel an Eurostecker.



4. Inhalt

1x Spiegelkugelständer

1x Anschluss



5. Sinne-Stimulation

Anblick.

7. Sicherheit



BITTE BEACHTEN SIE, !!!

Gesundheitsrisiken! Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle, weil empfindliche Menschen eine Gefahr für sich selbst durch einen epileptischen Schock unterziehen können.



8. Technische Daten

Stromversorgung:	230 V
Energieverbrauch:	6 Watt
Drehzahl:	8 U/min
Maximale Umgebungstemperatur:	45 °C
Maximale Gehäusetemperatur:	60 °C
Minus. Abstand entzündbare Oberflächen:	0,5 Mio.
Minus. Abstand zum Lichtobjekt:	0,6 Mio.
Anzahl der LEDs:	18
Gewicht:	0.5 kg
Grosse:	13 x 13 x 21 cm

9. Installation

Installieren Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche. Schließen Sie das Gerät mit dem Netzstecker an die Steckdose an. Die Spiegelkugel dreht sich mit ca. 8 U/min um die eigene Achse und wird von 18 LEDs (6x rot, 3x blau, 3x grün, 6x weiß) im Sockel darunter beleuchtet.


1. Produktname

Sensaring

2. Produktcode

14434500

3. Farbe wie abgebildet

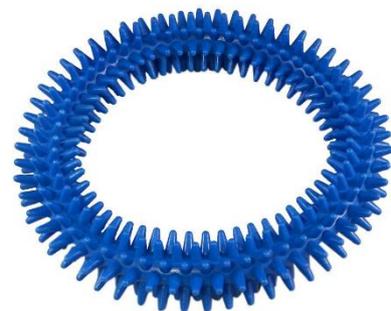

4. Kurzbeschreibung

Groß und leicht zu greifender Igelring mit weichen Ohrsteckern. Zum Werfen, Fangen oder für taktile Übungen. Farben je nach Lagerbestand. Größe: 17 cm Durchmesser

5. Sinne-Stimulation

fühlen



1. Produktname

Vibrierendes Kissen blau

2. Produktcode

16776840

3. Farbe

Blau



4. Kurzbeschreibung

Vibrierende Kissen aus taktilem Bezugsstoff. Drücken Sie das Kissen, um es vibrieren zu lassen, und lassen Sie es los, um aufzuhören. Gibt sanfte Massage für einen wunden Rücken oder müde Füße. Funktioniert mit 2D-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

5. Inhalt

- 1x vibrierendes Kissen. (**Bitte beachten Sie, dass Batterien nicht im Lieferumfang enthalten sind.**)

6. Sinne-Stimulation

Fühlen

7. Inbetriebnahme

Sanfter Druck auf das Kissen aktiviert das Kissen und aktiviert das Zittern. Das Kissen kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Durchblutung zu erhöhen. Es ist jedoch kein Medikament oder eine Alternative zu professioneller medizinischer Hilfe. Wenn der Schmerz anhält, ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen.

8. Zusätzliche Informationen

- Das vibrierende Kissen kann zum Beispiel bei Folgendem hilfreich sein:
- Zur Entspannung und Erweichung geschwollener Knöchel legen Sie die Füße auf das Kissen.
- Um müde und schmerzende Muskeln zu erweichen, legen Sie Kissen hinter die Waden.
- Zur Entspannung und Linderung von Schmerzen in den Gelenken legen Sie Kissen hinter die Knie.
- Um ischiatische Schmerzen zu lindern, legen Sie das Kissen in den unteren Rücken.
- Um einem schmerzenden Nacken und damit auch der Anspannung und dem Stress, der Kopfschmerzen verursachen kann, entgegenzuwirken, legen Sie das Kissen zwischen die Schulterblätter.
- Damit Vibrationen durch den gesamten Rücken gelangen können. Legen Sie das Kissen in die Mitte des Rückens.

9. Sicherheit

Überwachen Sie immer die Verwendung des Vibrationspads.

10. Technische Informationen

Größe : 30 x 30 cm





Gewicht: 0,35 kg

11. Installation

- Öffnen Sie den Reißverschluss auf der Rückseite des Kissens.
- Entfernen Sie den Kunststoffhalter vom Kissen und legen Sie die Batterien ein (achten Sie auf die korrekte angegebene Polarität). Stellen Sie sicher, dass die Batterien in die gleiche Richtung platziert sind.
- Setzen Sie den Kunststoffhalter wieder ein und schließen Sie den Reißverschluss.

12. Wartung

Ersetzen Sie die Batterien bei Bedarf. Die Abdeckung kann zur Reinigung vorsichtig entfernt werden. Der Bezug kann nur von Hand mit einem sehr milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Das vibrierende Pad und die Abdeckung können nicht in Wasser getaucht werden.



1. Produktname

Mobile Sensory Unit

2. Produktcode

18737010

3. Farbe

wie abgebildet

4. Kurzbeschreibung

Wirtschaftlich ausgelegte mobile Schnüffleinheit. Einfach an Ihre persönlichen Wünsche anzupassen, indem Sie Snoezel-Produkte hinzufügen. Attraktives, modernes Design. Leicht und leicht zu manövrieren, kann der Trolley scharfe Kurven machen und passt in kleine Aufzüge. Raffinierte Fächer bieten viel Stauraum für Produkte und Dokumente, während die Oberseite zusätzlichen Arbeitsraum bietet. Dank der integrierten Netzversorgung mit Lautsprecherkabeln ist eine Steckdose ausreichend. Mit Griffen und gebremsten Rollen für einfache Bedienung. Sofort einsatzbereit. Ahornholz-Finish. Einzelne Artikel sind nicht enthalten. Lieferung ohne Seitenregal oder Halterung für Wassersäule.

Größe: 70 cm lang x 50 cm breit x 110 cm hoch

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de